



## Manuel d'installation pour le test MindPulse

### Version Mac

En amont de l'installation, il est nécessaire de disposer :

- D'un **ordinateur 64 bit connecté**.
- D'une de ces **versions de MacOS d'exploitation** : High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur.
- D'une **souris filaire** (avec un fil) de bonne qualité.

*NB : les normes ont été réalisées avec une souris filaire. Selon la disponibilité d'une souris filaire et l'aisance du patient il semble cependant possible d'utiliser le pavé tactile.*

En amont de la consultation, il est conseillé de :

- Fermer les autres logiciels en cours.
- De couper le son.
- De régler la luminosité (forte) en veillant à la qualité des contrastes et au confort du patient.
- D'assurer une distance à l'écran optimale (de 50 à 70 cm) ainsi qu'une bonne posture.

# Sommaire

**I | INSTALLATION SIMPLE** ..... p. 2

**II | INSTALLATION DÉTAILLÉE** ..... p. 3-7



## I. INSTALLATION SIMPLE

- 1 En cliquant sur logo Apple, **télécharger** le fichier d'installation .zip
- 2 **Double-cliquer** sur le fichier d'installation téléchargé.
- 3 Lancer l'installation en appuyant sur **continuer**.
- 4 Choisir **la destination** de sauvegarde et appuyer sur **continuer**.
- 5 Choisir **le type** d'installation et appuyer sur **installer**.
- 6 Installation réussie, **Mindpulse est disponible !**



## II. INSTALLATION DÉTAILLÉE

### Messages d'alerte et d'erreur possibles

Les messages d'alerte ou d'erreur sont simplement liés au fait que notre programme est récent, qu'il n'est pas encore reconnu par tous les systèmes d'exploitation ou tous les antivirus. Aussi il se peut que votre ordinateur déclenche une alerte de sécurité Antivirus :

**Nous vous garantissons que notre plateforme de téléchargement [www.mindpulse.net](http://www.mindpulse.net) est totalement sécurisée.**

1

En cliquant sur logo Apple, **télécharger** le fichier d'installation .zip

2


**Double-cliquer** sur le fichier d'installation téléchargé.



Mac vous avertit qu'il ne connaît pas l'application.  
Cliquer sur **OK**.


3

Appuyer sur le **menu pomme** situé en haut à gauche.

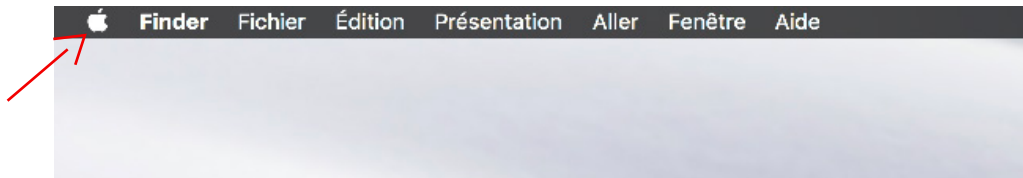


4

Choisir **Préférence Systèmes**.

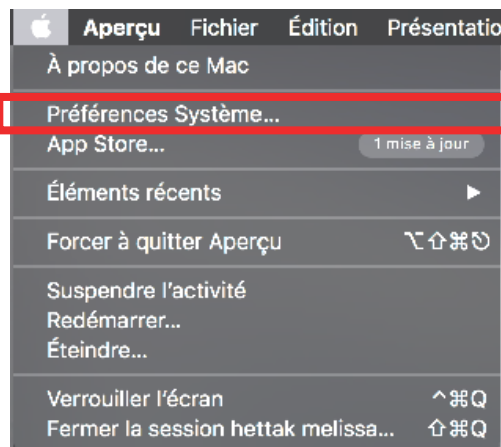

5


Appuyer sur **Sécurité et confidentialité**.

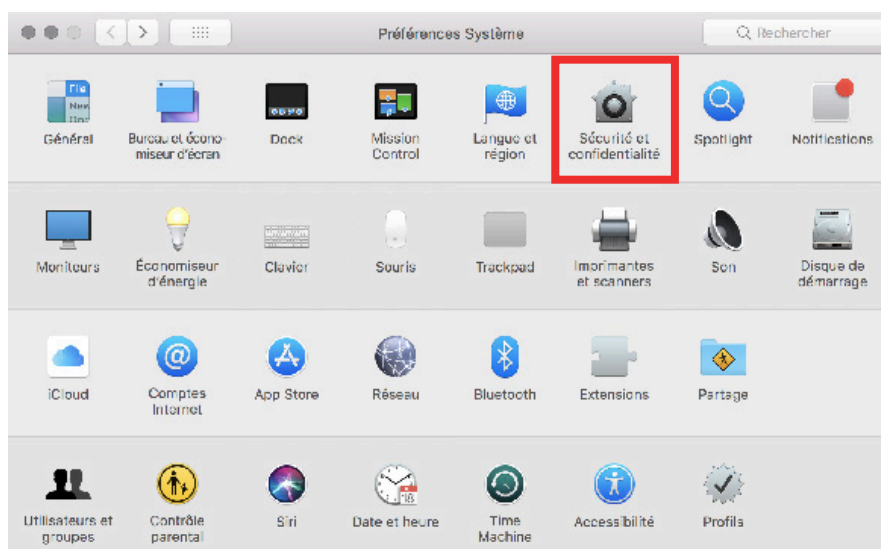




6

Cliquer sur l'onglet **Général** et appuyer sur **Ouvrir quand même**.

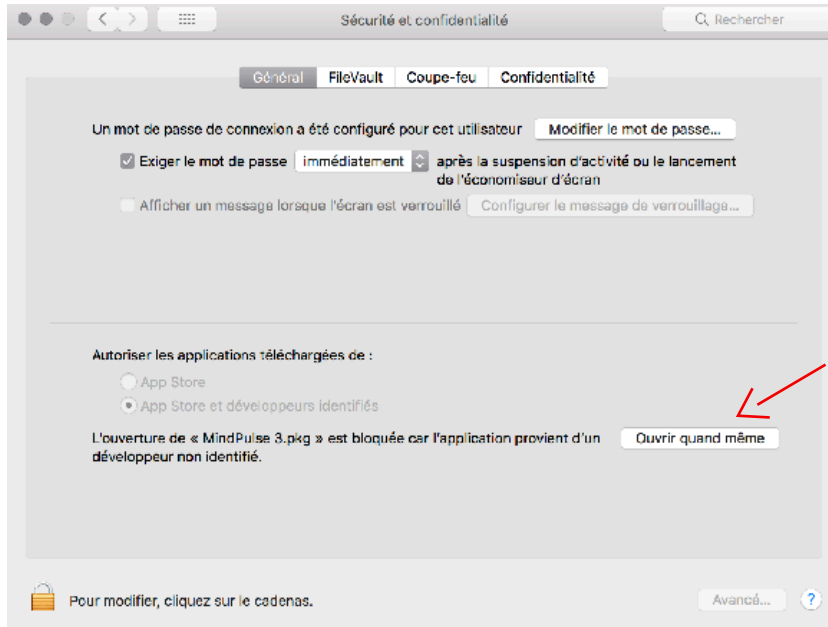

7


Appuyer sur **Ouvrir**.

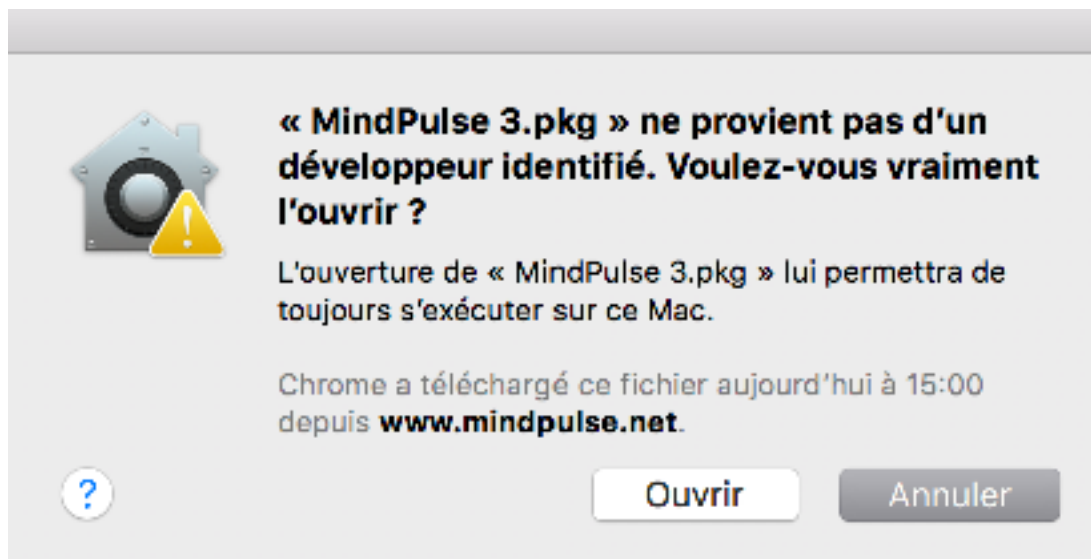



8

Lancer l'installation en appuyant sur **Continuer**.

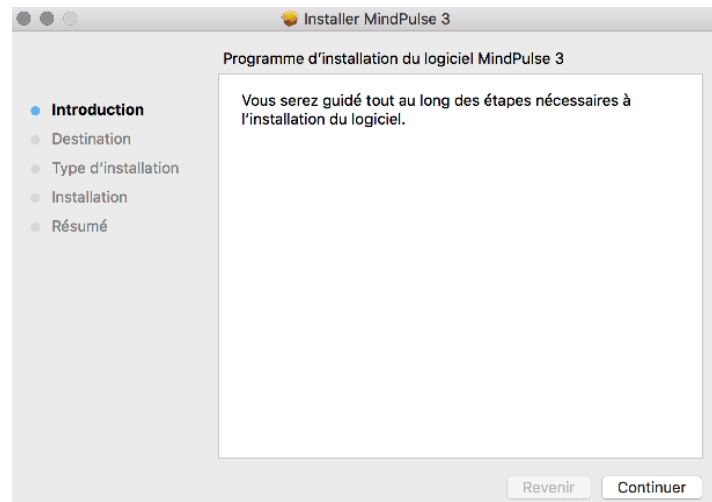

9


Choisir la **Destination** de sauvegarde et appuyer sur **Continuer**.





10

Choisir le **Type d'installation** et appuyer sur **Installer**.

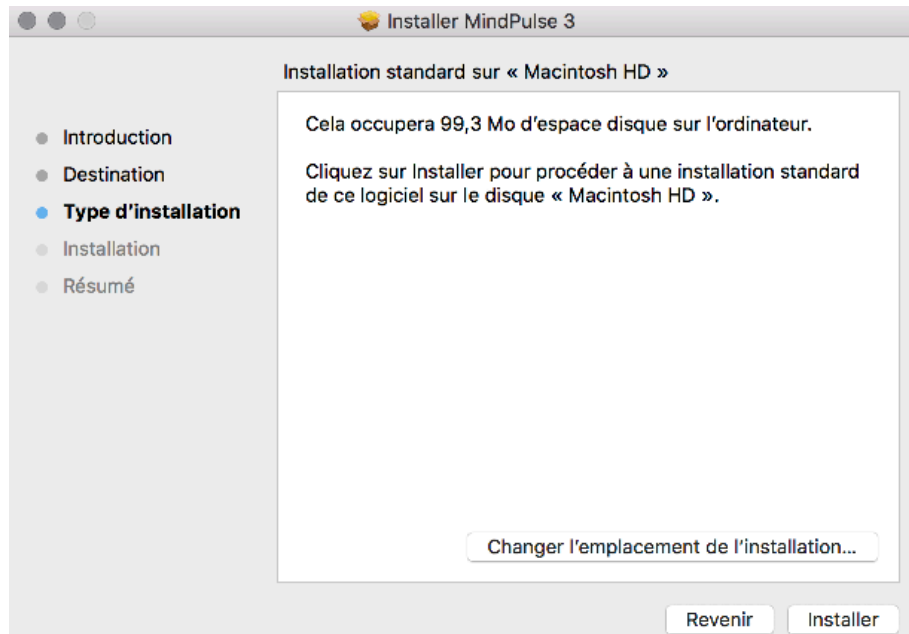

11

Installation réussie, **Mindpulse est disponible !**

